



# Design your lens

Microlens presenteert het echte custom zachte contactlens system: **Microlens Rx**  
Beschikbaar in sferisch, torisch, multifocaal en multifocaal torisch  
Een uniek systeem dat u de mogelijkheid biedt uw eigen zachte contactlens te ontwerpen welke volledig is aan te passen aan de vorm van het oog en zicht prioriteit van de klant.  
U bent de designer van de lens.

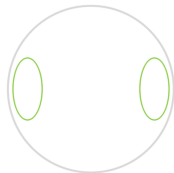

Dynamische stabilisatie

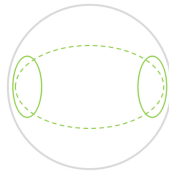

Dynamische stabilisatie/  
Binnen torisch




Prisma  
Ballast

Bij het ontwerpen van de lens wordt niet alleen rekening gehouden met de cornea en sclera, ook de vorm en stand van de oogleden bepalen de keuze van type stabilisatie.  
Deze mogelijkheden zorgen voor een perfecte centrering en beweging.



Multifocaal 1

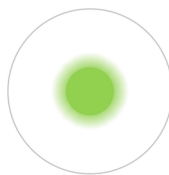

Multifocaal 2



Multifocaal 3

U gaat samen met de klant op zoek naar het meest geschikte multifocale design. Aan de hand van onder andere de pupilgrootte en zicht prioriteit van de klant bepaalt u welke van de drie multifocale designs het meest geschikt is en hoe het sterkte verloop van het design moet worden opgebouwd. Deze mogelijkheden zal het drop out percentage voor de alsmaar groeiende presbyopie doelgroep verlagen.

## Leveringsbereik

Radius	7.00 tot 12.00 mm in stappen van 0.10
Diameter	12.00 tot 15.50 mm in stappen van 0.10
Sterkte	-40.00 tot +40.00 dpt. in stappen van 0.25
Cilinder	-0.75 tot -7.75 dpt. in stappen van 0.50
As	1 tot 180* in stappen van 1*
Additie	+0.50 tot +4.00 dpt. in stappen 0.50
	Centre Near en Centre Distance
Materiaal	Classic, Excellent en Ultimate

